

JAK UŻYWAĆ IRYGATORA DO ZĘBÓW?

1.



Napełnij zbiornik czystą, letnią wodą.

2.



Ustaw dyszę urządzenia pod kątem 90 st. tuż przy linii dziąseł i uruchom irygator.

3.



Przesuwaj powoli końcówkę po łuku zębowym. Dokładnie czyść przestrzenie międzyzębowe i okolice zetknięcia zębów z dziąslami.

PORADY

- ▶ **Przy pierwszym użyciu** lub podczas czyszczenia kieszonek międzyzębowych stosuj strumień o niższym ciśnieniu.
- ▶ Używaj **specjalnego odkamieniacza** do irygatora.
- ▶ **Nie zaleca się** wlewania do irygatora płynów do płukania jamy ustnej.

shop-dent

artykuły do higieny jamy ustnej

KTO MOŻE STOSOWAĆ IRYGATORY?

- ▶ Irygatory są dobre **dla każdego**, do codziennej pielęgnacji.
- ▶ **Szczególnie** poleca się je osobom:
 - posiadającym aparat ortodontyczny, implanty, korony czy mosty dentystyczne
 - z recesją dziąseł i głębokimi kieszonkami dziąsłowymi.



MASZ PYTANIA?



bok@shop-dent.pl



22 112 38 38



www.shop-dent.pl

Odwiedź nasz sklep. Sprawdź, gdzie jesteśmy na www.shop-dent.pl/nasze-sklepy.

shop-dent

artykuły do higieny jamy ustnej

Irygatory dentystyczne



Sięgnij po
uśmiech

Irygatory dentystyczne - korzyści

CZYSZTE PRZESTRZENIE MIĘDZYŻĘBOWE

Irygator strumieniem wody pod ciśnieniem czyści zakamarki zębów, do których nie dociera szczoteczka.

ŚWIEŻY ODDECH


Pomaga zwalczyć nieświeży oddech.

ZDROWE DZIAŚŁA

Strumień wody masuje dziąsła, poprawiając ich ukrwienie.

KOMFORT

Czyszczenie irygatorem jest wyjątkowo proste i trwa znacznie krócej niż nitkowanie.

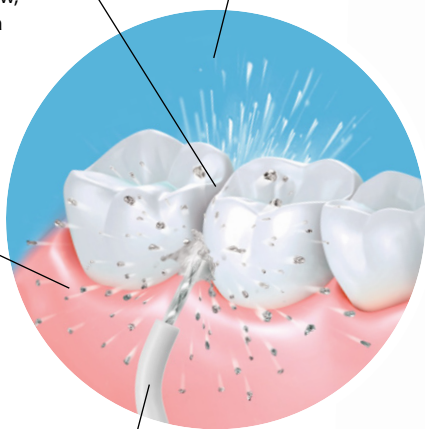

Irygator bezprzewodowy (przenośny)

Irygator przewodowy (stacjonarny)

Niektóre irygatory wyposażone są w dodatkowe specjalistyczne końcówki, które ułatwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc.

Irygatory są **bezpieczne** i posiadają **regulację ciśnienia**, które dopasowujemy do własnych potrzeb.

Shop Dent poleca



Waterpik WP100 E2 Ultra

SEYSSO Oxygen Travel

Panasonic EW1211

	Waterpik WP100 E2 Ultra	SEYSSO Oxygen Travel	Panasonic EW1211
typ	stacjonarny	przenośny	przenośny
ciśnienie	6,2 bara	6,2 bara	5,9 bara
ilość stopni regulacji	10	3	3
pojemność	600 ml	150 ml	130 ml
zasilanie	sieciowe	akumulatorowe	akumulatorowe
cechy	Pojemnik na końcówki w przykrywcę zbiornika	czas działania na jednym ładowaniu: do 70 minut	czas działania na jednym ładowaniu: 15 minut
cena	ok. 300 zł	ok. 300 zł	ok. 190 zł

Miejsce na notatki

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....